

## CONTAK RENEWAL<sup>®</sup> 3 e 4 Serrare tutte le otto (8) viti di fissaggio

### SOMMARIO

Analogamente ai defibrillatori per terapia di risincronizzazione cardiaca (CRT-D) CONTAK RENEWAL<sup>®</sup> 1 e 2, i CRT-D CONTAK RENEWAL 3 e 4 hanno tutti un totale di otto (8) viti di fissaggio da serrare mentre si collegano gli elettrocateri al generatore di impulsi. Tuttavia, per i CRT-D CONTAK RENEWAL 3 e 4, le posizioni delle viti di fissaggio sono cambiate.

I CRT-D CONTAK RENEWAL 3 e 4 hanno tutti un totale di otto (8) viti di fissaggio da serrare mentre si collegano gli elettrocateri al generatore di impulsi. Come illustrato dallo schema sottostante, quattro (4) viti di fissaggio si trovano sulla sommità della testata (Figura 1); tre (3) viti di fissaggio si trovano sul retro della testata (Figura 2) e una (1) vite di fissaggio è nella parte anteriore della testata (Figura 3).

**Ricordare: serrare tutte e otto le viti di fissaggio dei CRT-D CONTAK RENEWAL 3 e 4.**

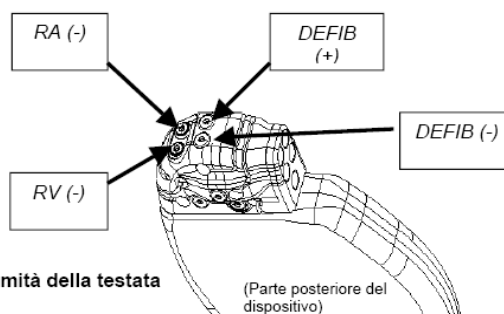


Figura 1. Sommità della testata

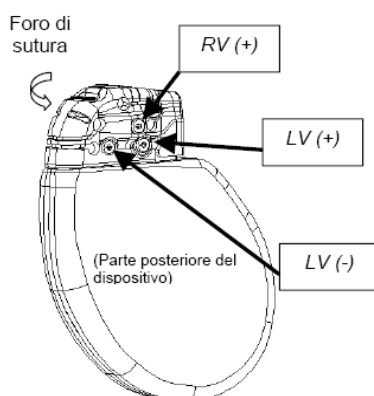


Figura 2. Retro della testata

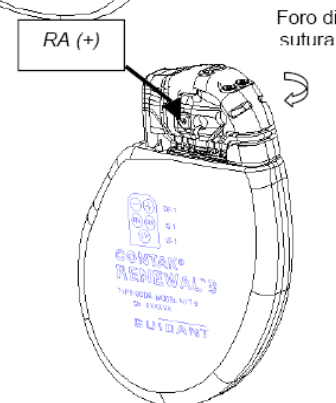


Figura 3. Parte anteriore della testata

### CRM Prodotti di riferimento

I seguenti sono marchi di fabbrica di Cardiac Pacemakers, Inc., un'azienda del gruppo Boston Scientific: CONTAK RENEWAL.

I prodotti indicati di seguito potrebbero non essere presenti in tutte le aree geografiche. Per informazioni complete sul funzionamento del dispositivo consultare la documentazione sul prodotto.

### CRM CONTATTI PER INFORMAZIONI

#### Stati Uniti

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

Servizio Tecnico – Stati Uniti  
LATITUDE Supporto Clinico – Stati Uniti

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

[tech.services@bsci.com](mailto:tech.services@bsci.com)

[latitude@bsci.com](mailto:latitude@bsci.com)

Assistenza pazienti

1.866.484.3268

#### Internazionale

[www.bostonscientific-international.com](http://www.bostonscientific-international.com)

Servizio Tecnico – Europa

+32 2 416 7222

[eurtechservice@bsci.com](mailto:eurtechservice@bsci.com)

Assistenza clienti internazionale LATITUDE

[www.latitude.bostonscientific-international.com](http://www.latitude.bostonscientific-international.com)

[latitude.international@bsci.com](mailto:latitude.international@bsci.com)